

Y-Click™



Conector en Y para aplicaciones de ACTP

El Y-Click de Elcam Medical es un dispositivo hemostático fácil de usar, adecuado tanto para procedimientos diagnósticos como intervencionistas.

El Y-Click se ha desarrollado en estrecha colaboración con especialistas en intervencionismo, proporcionando un manejo intuitivo, facilidad de uso y una pérdida mínima de sangre, aspectos esenciales durante los procedimientos intervencionistas.

El diseño ergonómico del Y-Click permite una manipulación sencilla y una reducción significativa de la pérdida de sangre durante la introducción, uso y retirada de dispositivos diagnósticos e intervencionistas utilizados en procedimientos de angioplastia: guías, catéteres guía, balones y stents. Esto se consigue mediante una válvula única de tres etapas accionada por palanca: posiciones abierta, semiabierta y cerrada.

Ventajas exclusivas

- Evita el reflujo de sangre en posición cerrada y lo minimiza en posición semiabierta
- Evita la entrada de aire en el dispositivo cuando la válvula está en posición semiabierta y cerrada
- Manejo con una sola mano
- Indicación sonora – los “clics” indican el cambio entre posiciones
- Buena conservación de la señal en posiciones cerrada y semiabierta
- Mecanismo de seguridad de autocierre – al aplicar alta presión en el puerto lateral (inyección de medio de contraste), el Y-Click pasa automáticamente de posición semiabierta a cerrada

Especificaciones del producto


- Puede utilizarse con inyectoras automáticas de medio de contraste con un caudal de hasta 15cc por segundo y una presión de hasta 600 psi
- Adecuado para dispositivos de angiografía con catéteres guía de 9 Fr o menores
- Compatible con guías de 0.014" – 0.038" de diámetro

Sistema de calidad

- Los procesos altamente automatizados de Elcam garantizan la producción de productos de alta calidad constante.
- Operamos en estricto cumplimiento de las normas internacionales de calidad.
- Todos los componentes de “Y-Click” cumplen los requisitos de biocompatibilidad conforme a ISO 10993-1 bajo ‘contacto sanguíneo, indirecto, duración limitada’.


Estado reglamentario:

- Autorización 510(k) (#K060759)

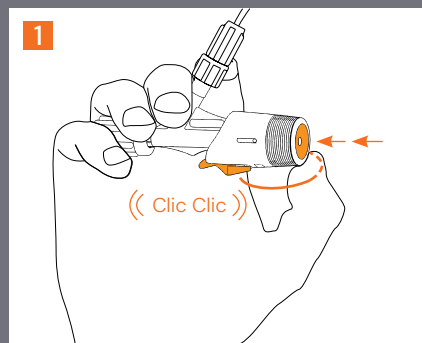


Posición abierta

2 clics de la válvula hacia dentro.
Para la inserción de catéteres/guías y agujas de inserción.

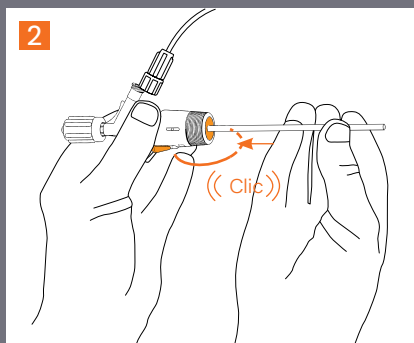

Posición semiabierta

1 clic de la válvula hacia dentro.
Para manipular el catéter con mínima pérdida de sangre y mínima fricción.

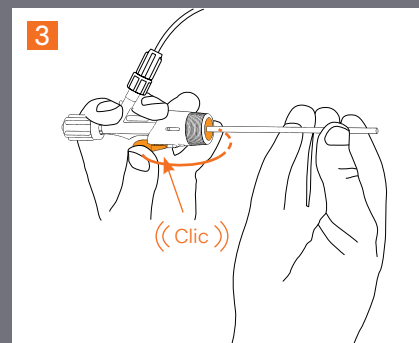

Posición cerrada

Presionar la palanca – la válvula vuelve a la posición cerrada. Para la maniobrabilidad de guías y catéteres de pequeño diámetro y para la inyección de medio de contraste a alta presión.



www.elcam-medical.com

Head Office/Manufacturer Elcam Medical

BarAm 1386000,
Israel
Tel: 972 4 698 8120/1
Fax: 972 4 698 0777
sales@elcam.co.il

USA Elcam Medical Inc.

1 University Plaza, Ste. 511
Hackensack, NJ 07601
Tel: +1 201 4571120
Fax: +1 201 4571125
info@elcam-medical.com

Europe Elcam Medical Europe

Via Emilia Romagna 15,
41012 Carpi (Modena) Italy
Tel: +39 059 697710
Fax: +39 059 697705
sales.eu@elcam-medical.com

China Elcam China Office

Room 3309, Jinhai Mansion
No. 89 of Anshun Road,
Shanghai, PRC. Zip: 200051
Tel: +86 21 62829967
Fax: +86 21 62829967
johnliu02@126.com